


Fever FRIENDZ®

Stick-On Fever Indicators

Fever-Friendz® is a kid friendly temperature indicator that allows you to easily monitor your child's temperature for up to 48 hours.

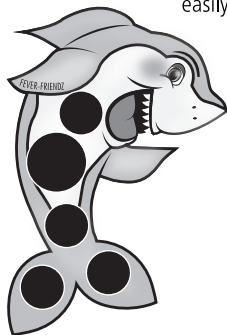

How does Fever-Friendz® work?

Fever-Friendz® uses encapsulated liquid crystal technology to indicate the user's body temperature in 1 degree Celsius increments.

Fever-Friendz® is the ideal solution for continuous temperature monitoring because it is:

- Fast, effective and safe
- Accurate within 0.5° C
- Visible at a glance
- Hypoallergenic

Using Fever-Friendz®


Step 1: Fast, Safe and Gentle Application

Simply peel Fever-Friendz® off the backing and apply directly to the skin. For optimal accuracy place on the forehead. It can also be placed under the armpit, on the chest, or between the shoulder blades.

Step 2: Visible Readings in Seconds

Within seconds Fever-Friendz® light up indicating N (for normal), 37°, 38°, 39°, or 40° (and over). The temperature reading corresponds to the highest figure that appears green. If green does not appear, the temperature will be mid-way between that indicated by the tan and the blue spots. Normal axillary temperature range is 36.1° C to 37.2° C.

Fever-Friendz® will adhere for up to 48 hours, depending on skin type, placement or activity. Removing and repositioning reduces adhesion.

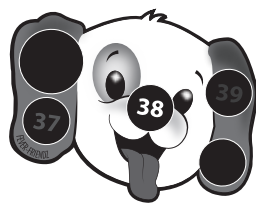

Temperature indicated: 38° C

Step 3: Easy, Painless Removal

When continuous monitoring is no longer necessary, simply remove Fever-Friendz® and discard. **DO NOT REUSE.**

WARNING! Choking hazard. Store out of reach of small children. Recommended for children 12 months and older. Fever-Friendz® is a fever indicator. Always use a thermometer to confirm temperature reading. Use of the fever indicators is not intended as a substitute for a consultation with your healthcare professional.

For readings you can trust, discover the complete line of Physio Logic® thermometers.

Kids and parents will love Fever-Friendz®, the convenient, easy to use temperature indicator for continuous fever monitoring. For those times when you want fast, precise readings, use one of our Accuflex® or Quick Scan™ digital thermometers.

Feature	Fever-Friendz® Stick-On Fever Indicators	Accuflex® Flexible Digital Thermometers	Quick-Scan™ Ear and Forehead Thermometer
Speed	Visible at a glance	5 or 10 seconds*	0.1 seconds
Accuracy	± 0.5°C	± 0.1° C / 0.2° F	± 0.2° C / 0.4° F
Comfort	Gentle, safe and kid-friendly	Gentle-flex tip adds comfort & safety	Scan from ear or forehead
Hygiene	Disposable	Washable	Washable
Convenience	48 hours continuous monitoring	6 times faster than conventional digital thermometers	No probe covers required


* Average clinical test results for Accuflex 10: 10.2 seconds rectal, 15.2 seconds oral, 20.8 seconds under the arm. Clinical results range from 9.75 to 28.0 seconds. Average clinical test results for Accuflex 5: 5.6 seconds oral, 10.2 seconds rectal, 6.9 seconds under the arm.

Visit www.amgphysiologic.com or www.fever-bugz.ca for more product information.

Fever FRIENDZ®

Timbres thermo-indicateurs

Fever-Friendz® est un timbre thermo-indicateur qui vous permet de surveiller l'évolution de la température de votre enfant pendant 48 heures.

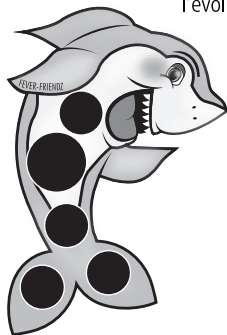

Comment fonctionnent les Fever-Friendz® ?

Les timbres Fever-Friendz® utilisent la technologie des cristaux liquides capsulés pour afficher la température du corps au degré Celsius près.

Fever-Friendz® est la solution idéale pour la surveillance de la température parce qu'il est :

- Rapide, efficace et sûr
- Précis à $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- Visible en un coup d'œil
- Hypoallergénique

L'utilisation du Fever-Friendz®


Étape 1: Application rapide et sécuritaire

Détacher de l'endos de la bande protectrice en plastique et appliquer directement sur la peau. Pour plus de précision, placer sur le front. Fever-Friendz® peut aussi être utilisé sous les aisselles, sur la poitrine ou entre les omoplates.

Étape 2 : Résultats visibles en quelques secondes

Après quelques secondes, Fever-Friendz® affichera « N » (pour normal), « 37° », « 38° », « 39° » ou « 40° » (ou plus). La température correspond au nombre qui affiche la plus grande intensité de vert. Si aucun nombre n'apparaît vert, la température sera entre celle indiquée en brun et celle indiquée en bleu. La température axillaire normale se situe entre 36,1°C et 37,2°C.

Selon le type de peau, l'emplacement ou le degré d'activité, Fever-Friendz® peut demeurer sur la peau jusqu'à 48 heures. Le retirer puis le remettre en diminuant l'adhésivité.

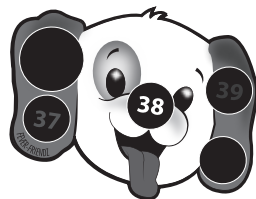

Température affichée : 38°C

Étape 3: Se retire facilement et sans douleur

Lorsque la surveillance continue n'est plus utile, détacher délicatement et jeter. **NE PAS RÉUTILISER.**

ATTENTION ! Risque d'étouffement. Ranger hors de la portée des jeunes enfants. Recommandé pour les enfants âgés de 12 mois et plus. Fever-Friendz® est un timbre thermo-indicateur. Utilisez toujours un thermomètre pour vérifier les prises de température. Les timbres thermo-indicateurs Fever-Friendz® ne doivent pas remplacer une visite chez le médecin.

Pour des lectures précises, découvrez la gamme de thermomètres Physio Logic®.

Les enfants et les parents aimeront Fever-Friendz®, le timbre thermo-indicateur pratique et facile à utiliser qui permet de surveiller la température corporelle. Et, pour des lectures rapides et précises, utilisez un de nos thermomètres digitaux Accuflex® ou Quick Scan™.

Caractéristiques	Fever-Friendz® Timbre thermo-indicateur	Accuflex® Thermomètres numériques flexibles	Quick-Scan™ Thermomètre à balayage rapide
Vitesse	En un coup d'oeil	5 ou 10 secondes*	0.1 seconde
Précision	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.1^{\circ}\text{C} / 0.2^{\circ}\text{F}$	$\pm 0.2^{\circ}\text{C} / 0.4^{\circ}\text{F}$
Confort	Doux, sécuritaire, aimé des enfants	Pointe douce et flexible	Mesure dans l'oreille ou sur le front
Hygiène	Jetable	Lavable	Lavable
Pratique	48 heures de surveillance continue	6 fois plus rapide (qu'un thermomètre numérique conventionnel)	Aucun protège-sonde n'est requis

* Résultats cliniques moyens pour Accuflex 10 : relevé rectal 10,2 secondes, relevé oral 15,2 secondes, relevé aux aisselles 20,8 secondes. Les résultats cliniques varient entre 9,75 à 28,0 secondes. Résultats cliniques moyens pour Accuflex 5 : oral 5,6 secondes, relevé rectal 10,2 secondes, relevé aux aisselles 6,9 secondes.